


メタログ方法

D

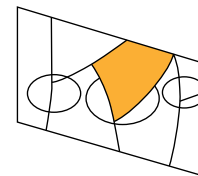

研磨

手順	PG	FG
表面	MD-Piano 220	MD-Allegro
研粒	ダイヤモンド	DiaPro AllegroLargo 9
砂粒/ 粒子サイズ		9 μm
潤滑剤	水	
回転速度 [rpm]	300	150
力 [N]/ 試料	40	30
時間 [分]	平面まで	3

研磨

手順	DP	OP
表面	MD-Dac	MD-Chem
研粒	DiaPro Dac 3	OP-A
粒子サイズ	3 μm	
潤滑剤		
回転速度 [rpm]	150	150
力 [N]/ 試料	30	15
時間 [分]	3	2